

InterPulse

Pulsed Lavage System

インターパルス パルスイリゲーションシステム

- ・ シンプル&パワフル
- ・ 進化したパルスイリゲーション/サクション



さらにパワーアップ!さらに使いやすく!

パルス洗浄装置のパイオニア ストライカー社が持つ経験とノウハウを結集。



外部ポンプとの接続など煩雑なセットアップをなくし、シンプルさと使いやすさを追求。



- 水圧が更に強くなりました。
- パルス期とインターパルス期がはっきり別れる特殊モーターをハンドピースに内蔵し、効果的な洗浄が可能です。
- ソフトコーンの先端に吸引口を設けました。噴出口との完全分離により、サクション／イリゲーションの効率が良くなりました。
- トリガー操作によるバリエーションコントロールが可能。さらにトリガーロック機能に加わり、使いやすさがアップしました。
- 使用部位、噴出方向に応じてピストルのようにも、また杖のように握ることもできます。どちらも手にフィットするよう人間工学的にデザインされています。

人工関節置換術のために…

- ボーンセメントインターフェースを約2.55倍強化。
- 脂肪塞栓症の危険率を減少。
- 同時吸引が可能です。
- 使いやすいエルゴノミクスデザイン。

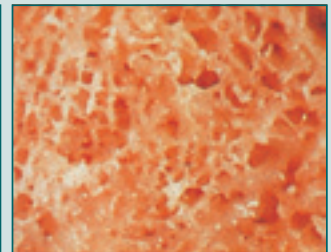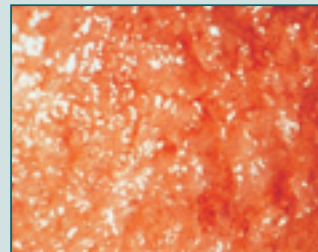

パルスイリゲーションを行う前の海綿骨 パルスイリゲーション処置後



オールディスポタイプ



充電バッテリータイプ

コストパフォーマンスに優れ 環境に優しい充電タイプ

コスト面、廃棄処理に関わる選択肢を増やしました。もちろん、モーター内蔵ハンドピースとチップは滅菌済でパッケージされており、場所を選ばず、いつでもすぐに使用できるメリットは変わりません。

0211-024-000
インターパルス
バッテリーチャージャー

0211-022-000
インターパルス
バッテリーパック



豊富なチップデザイン



<p>0210-004-000 大腿骨髄腔ブラシ サクシオン・イリゲーション用</p> <p>骨髄腔の洗浄が行えます。 最大流量:770ml/min</p>	<p>0210-008-000 大腿骨髄腔チップ サクシオン・イリゲーション用</p> <p>髄腔の径の小さな部分の洗浄が行える小径のフレキシブルなチップです。 最大流量:770ml/min</p>	<p>0210-010-000 ボーンクリーニングチップ サクシオン・イリゲーション用</p> <p>最も強力な水圧のチップ。人工関節手術の際の骨の洗浄に効果的です。 水圧:22.4~40.7 PSI 最大流量:600ml/min パルス数:1,160cycle/min</p>
<p>0210-012-000 ソフトティッシュチップ サクシオン・イリゲーション用</p> <p>一般的な洗浄に使用します。軟組織を傷つけることなく洗浄が行えます。 水圧:10.1~11.5 PSI 最大流量:700ml/min パルス数:1,160cycle/min</p>	<p>0210-014-000 ハイフローチップ サクシオン・イリゲーション用</p> <p>外傷の洗浄に適した流量の大きなチップ。 水圧:5.9~19 PSI 最大流量:1,025ml/min パルス数:1,210cycle/min</p>	<p>0210-018-000 ファンズプレイチップ イリゲーション専用</p> <p>穏やかな水流で飛散が少ないチップ。軟組織の洗浄、および飛散が重大な問題であるケースに適しています。 水圧:3.0~5.2 PSI 最大流量:870ml/min パルス数:1,160cycle/min</p>

製品リスト

オールディスポタイプ (滅菌済)

カタログ番号	品名・規格		
0210-100-000	チップなし		
0210-110-000	インターパルス イリゲーション ハンドルセット サクシオンチューブ付	ボーンクリーニングチップ付	ソフトコーン スブラッシュ シールド付
0210-112-000		ソフトティッシュチップ付	
0210-114-000		ハイフローチップ付	
0210-118-000		ファンズプレイチップ付	
0210-200-000		チップなし	
0210-210-000	インターパルス イリゲーション ハンドルセット サクシオンチューブなし	ボーンクリーニングチップ付	ソフトコーン スブラッシュ シールド付
0210-212-000		ソフトティッシュチップ付	
0210-214-000		ハイフローチップ付	
0210-218-000		ファンズプレイチップ付	

充電バッテリータイプ (滅菌済)

カタログ番号	品名・規格		
0211-100-000	チップなし		
0211-110-000	インターパルス充電式 イリゲーション ハンドルセット サクシオンチューブ付	ボーンクリーニングチップ付	ソフトコーン スブラッシュ シールド付
0211-112-000		ソフトティッシュチップ付	
0211-114-000		ハイフローチップ付	
0211-118-000		ファンズプレイチップ付	
0211-212-000		ソフトティッシュチップ付	
0211-214-000	ハイフローチップ付		

充電バッテリー／バッテリー用アクセサリ

カタログ番号	品名・規格	
0211-022-000	インターパルス バッテリーパック	
0211-024-000	インターパルス バッテリーチャージャー	8個用

共通アクセサリ (滅菌済)

カタログ番号	品名・規格	
0210-004-000	大腿骨髄腔ブラシ	サクシオン・イリゲーション用
0210-008-000	大腿骨髄腔チップ	サクシオン・イリゲーション用
0210-010-000	ボーンクリーニングチップ	サクシオン・イリゲーション用
0210-012-000	ソフトティッシュチップ	サクシオン・イリゲーション用
0210-014-000	ハイフローチップ	サクシオン・イリゲーション用
0210-018-000	ファンズプレイチップ	イリゲーション専用
0210-034-000	ソフトコーン スブラッシュシールド	ミディアムサイズ直径15.5cm
SR-203-30*	ストライカー デュアルイリゲーションチュービング	

医療機器承認番号

販売名

21200BZY00566000	ストライカーインターパルスシステム
*20200BZY00992000	オーソテックエクセルイリゲーションキット

Joint Replacements

Trauma, Extremities & Deformities

Craniomaxillofacial

Spine

Biologics

Surgical Products

Neuro & ENT

Interventional Pain

Navigation

Endoscopy

Communications

Imaging

Patient Handling Equipment

EMS Equipment

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/medical.html

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。

@マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number:IT1-36
FT/SZ/1m 07/12

Copyright © 2012 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1