

stryker®

Instruments

STRYKER SURGICAL  
**COMMITTED**  
TO YOUR SUCCESS.



# System 7

Heavy Duty Power Tools

システム 7

CONFIDENCE  
IN YOUR HANDS



# 術者・病院スタッフのための設計

Stryker社のSystem7は、術者だけでなく、手術室特有のニーズにも応えるために設計されました。

術者にとってはハンドリングし易いためより使いやすく、病院スタッフにとっては、メンテナンスがより楽になりました。



システム7  
シングルトリガー  
ロータリーハンドピース  
7203-000-000

## System 7 の特長：

- 自動洗浄器に対応したシステム
- サジタルソーの静音化
- ストライカー SmartLiFE™ リチウムイオン電池と独自の ACP Technology™ によって、バッテリーの寿命と信頼性が向上
- ロータリーハンドピースのトルクがアップ
- 軽量化と安全性・操作性の向上

30 YEARS  
HEAVY DUTY BATTERY POWER

初めて手術用ヘビーデューティーパワーツールを世に送り出した1982年以降、Stryker社は医療従事者が仕事をしやすくなるようなイノベーションを追究し続けてきました。この業界をリードし続けることができたことに誇りを持ち、これからも最高水準のサービスに裏付けられたより良い品質を提供することに専心していきます。



システム7  
デジタル骨鋸ハンドピース  
7208-000-000

stryker

# System 7

CONFIDENCE  
IN YOUR HANDS

## System 7 ハンドピース

### 性能

- スピードと重量、およびトルクのバランスが向上
- 新型マイクロプロセッサによる連続監視でハンドピースとバッテリーの最適なパフォーマンスを確保
- ロータリーハンドピースのトルクがアップ
- サジタルソーのブレードマウントの設計を見直し、静音化に成功



システム 7  
サジタル骨鋸ハンドピース  
7208-000-000

システム 7  
レシプロ骨鋸ハンドピース  
7206-000-000

### 効率

- 独自のロータリーハンドピースデザインにより、すべてのアタッチメントでドリリングとリーミングの両方が可能

### 品質と信頼性

- すべてのハンドピースに 100 項目の品質検査を実施
- バッテリーのメモリ効果がないため、常に最大容量を持続
- バッテリーの保管期限の延長

## 操作性

- システム総重量の 29% 軽量化
- サジタルソーのヘッドデザインを改良し、簡単に確実なブレード装着が可能に
- 自動洗浄器に対応したシステム
- ロータリーハンドピースのトライアスロンアタッチメントの使用により手術部位への距離を短縮



システム 7  
デュアルトリガーロータリーハンドピース  
7205-000-000

システム 7  
プレジジョン骨鋸ハンドピース  
7209-000-000

システム 7  
胸骨鋸ハンドピース  
7207-000-000

## 標準化

- System 6 のバッテリーパックやアタッチメント、  
カッティングアクセサリーとの互換性を確保し、  
病院での在庫や交換費用を削減

# System 7

CONFIDENCE  
IN YOUR HANDS

BATTERIES

## System 7 バッテリー

### 品質と信頼性

- バッテリーのメモリ効果がないため、常に最大容量を維持
- リサイクル可能なストライカーの SmartLiFE バッテリーは環境にも配慮
- レーザー溶接によりバッテリー内への水分の浸入を防止
- バッテリー保管期限の延長

### 性能

- 作動時間の向上
  - ・ スモールバッテリーで 220% 向上
  - ・ ラージバッテリーで 183% 向上
- システム総重量の 29% 軽量化



### ストライカー SmartLiFE バッテリーとストライカー独自の ACP Technology

- 滅菌タイプのリチウムイオン電池
- 充電が必要ときに自ら手術チームに警告を発するインジケータライト付き
- ラージバッテリーとスモールバッテリーが、すべての System 7 ハンドピースで使用可能

### Active Cell Protection(ACP) Technology


- オートクレーブの熱による過剰曝露が生じると、バッテリーパックの信頼性を確保するためにユーザーに知らせる
- バッテリーがハンドピースまたは充電器に装着されていないときは、自動的に電圧を下げる



STERILIZATION

## System 7 滅菌ケース

- トレイを再設計し、ハンドピースとアタッチメントが滅菌ケースに入れやすくなりました。
- 耐久性に優れたステンレス鋼の滅菌ケース
- 自動洗浄器に対応したシステム

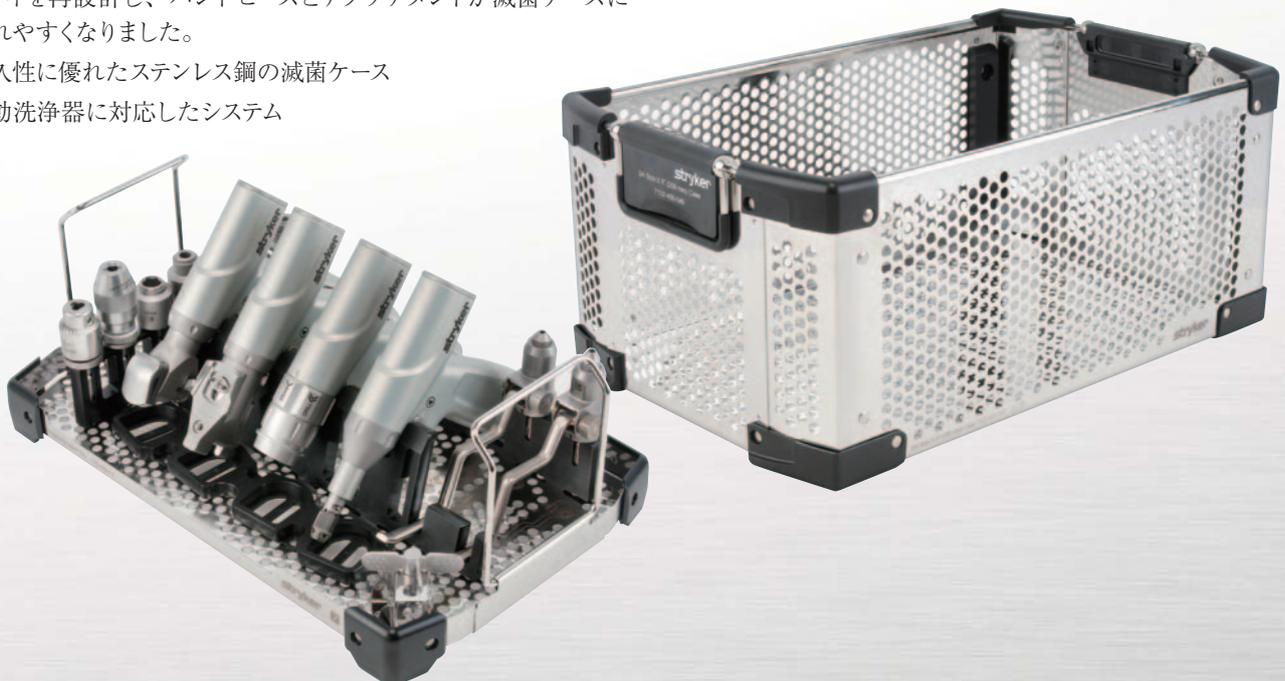

# カタログ番号一覧

## HANDPIECES

- 7208-000-000\* システム7 サジタル 骨鋸 ハンドピース
- 7209-000-000\* システム7 プレシジョン 骨鋸 ハンドピース
- 7205-000-000\* システム7 デュアルトリガー ロータリーハンドピース
- 7203-000-000\* システム7 シングルトリガー ロータリーハンドピース
- 7206-000-000\* システム7 レシプロ 骨鋸 ハンドピース
- 7207-000-000\* システム7 胸骨鋸 ハンドピース



## BATTERIES

- 7110-120-000 システム7 ユニバーサル チャージャー
- 7212-000-000\* システム7 リチウムイオン バッテリースモール
- 7215-000-000\* システム7 リチウムイオン バッテリーラージ



## ACCESSORIES

- 7203-026-000 システム7 デュアルトリガー ワイヤコレット
- 7203-126-000 システム7 デュアルトリガー ピンコレット
- 7203-226-000 システム7 デュアルトリガー ピンコレット ラージ
- 7203-036-000 システム7 シングルトリガー ワイヤコレット
- 7203-136-000 システム7 シングルトリガー ピンコレット
- 7203-236-000 システム7 シングルトリガー ピンコレット ラージ
- 6203-110-000 システム6 AOアタッチメント スモール
- 6203-113-000 システム6 ハドソンアタッチメント
- 6203-131-000 システム6 6.4 MM チャック キー 付
- 6203-132-000 システム6 4.0 MM チャック キー 付
- 6203-133-000 システム6 6.4 MM キーレスチャック
- 6203-134-000 システム6 3.2 MM キーレスチャック
- 6203-135-000 システム6 ハドソン 改良型 トリンクルアタッチメント
- 6203-160-000 システム6 トリンクルアタッチメント
- 6203-210-000 システム6 ASIFアタッチメント ラージ
- 6203-215-000 システム6 AO DHSアタッチメント ラージ
- 7207-003-000 システム7 胸骨 ガード



## STERILIZATION CASES

- 7102-450-000 システム7 滅菌 ケース 4本用 (インサートトレイ付)
- 7102-454-000 システム7 滅菌 ケース 3本用 (インサートトレイ付)
- 7102-453-000 システム7 滅菌 ケース スターナムソー用 (インサートトレイ付)



医療機器認証番号 販売名  
223AFBZX00198000\* システムシリーズ パワーシステム

---

**Joint Replacements**

---

**Trauma, Extremities & Deformities**

---

**Craniomaxillofacial**

---

**Spine**

---

**Biologics**

---

**Surgical Products**

---

**Neuro & ENT**

---

**Interventional Pain**

---

**Navigation**

---

**Endoscopy**

---

**Communications**

---

**Imaging**

---

**Patient Handling Equipment**

---

**EMS Equipment**

## 日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site  
[www.stryker.co.jp/medical.html](http://www.stryker.co.jp/medical.html)

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

@マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number:ITI-77  
HF/SK 5m 03/12

Copyright© 2012 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
日本ストライカー株式会社  
550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1